



# SECUTAPE®

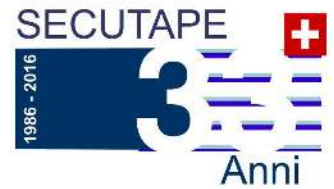

## Sistemi di fissaggio

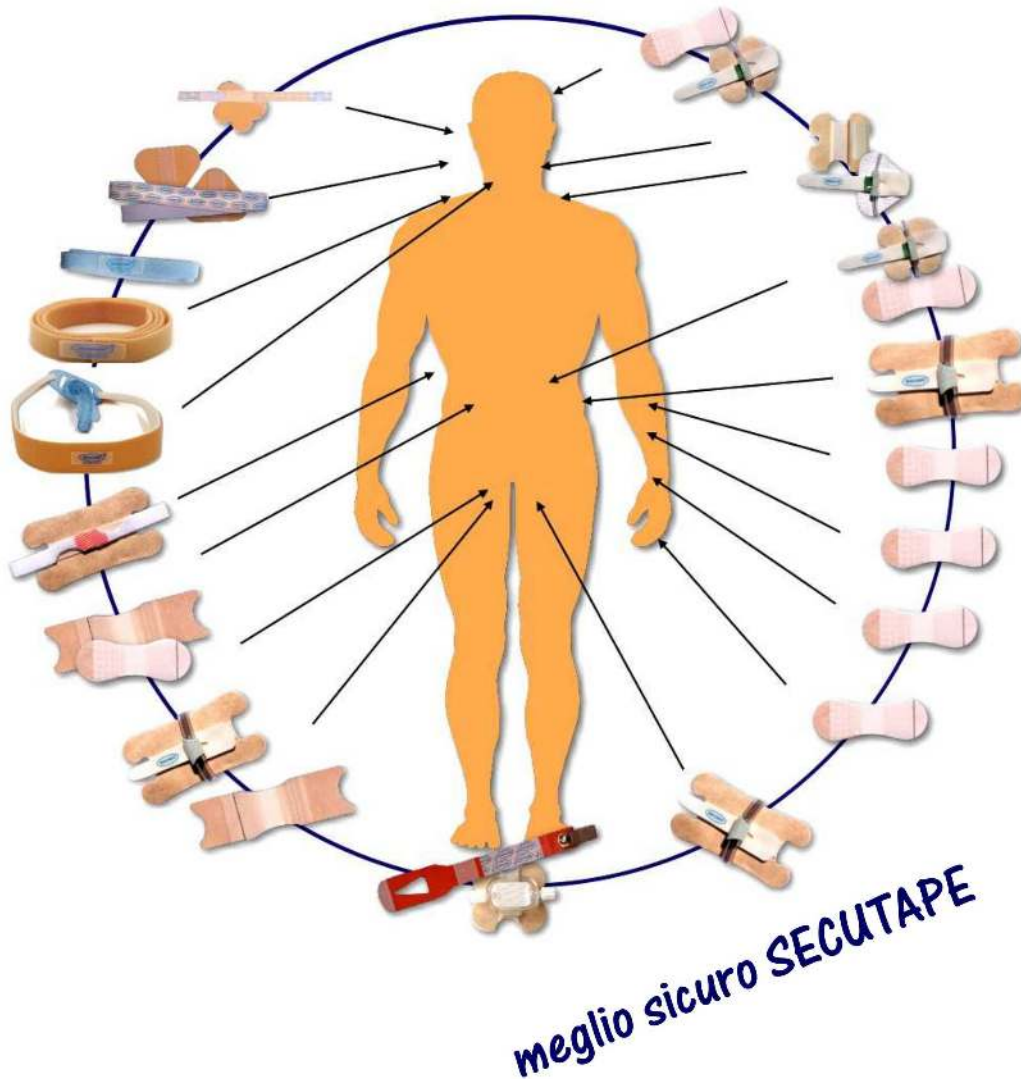

# CATALOGO

**Offriamo corsi di formazione gratuiti dei prodotti!**



**TechniMed AG**

SWITZERLAND since 1987

fon 0041 / 71 844 49 20

Kirchstrasse 54

CH-9400 Rorschach

fax 0041 / 71 845 52 45

Germany

fon 0800 007 9892

fax 0800 941 3012

Austria

fon 01/ 440 7979

fax 01/ 440 7990

CE

Made in Germany

[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)

Copyright by TechniMed AG

mail: [info@technimed.ch](mailto:info@technimed.ch)



Originalgrösse





## Misura 2 / 2+ / 3+ Fissaggi standard

### Provato da più di 25 anni per un milione di volte.

Il supporto con una ottima tenuta, ergonomico in vello traspirante e delicata alla pelle.

Facile da usare, può essere usato più volte (aperto e chiuso di nuovo) e tiene anche quando è bagnato ad esempio, se si bagna o il paziente si fa la doccia.

#### Particolarmente adatto per:

PEG, CAPD, CVC, suprapubico cateteri, infusioni, cateteri per l'urina, drenaggio redon, porti, drenaggi ferite, sonde per misurazione della pressione e tutti altri tubi.

#### Nota:

Art.No 8500200 aderisce bene sul bandaggio  
Art. No 8500201 aderisce bene sulla pelle



 **Art. No 8500200** 1 imball. 200 p.  
8 confezioni di 25 p.  
**Art. No 8500210** 1 imball. 1000 p.  
20 confezioni di 50 p.



 **Art. No 8500201** 1 imball. 200 p.  
8 confezioni di 25 p.  
**Art. No 8500211** 1 imball. 1000 p.  
20 confezioni di 50 p.



 **Art. No 8500301** 1 imball. 200 p.  
8 confezioni di 25 p.  
**Art. No 8500311** 1 imball. 1000 p.  
20 confezioni di 50 p.



**Può rimanere sul paziente  
4 - 5 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)





Originalgrösse



# SECUTAPE®

## Sistema di fissaggio VELCRO LEGANTE

La nuova generazione di fissaggi!

**Nuova sistema universale per tutte le applicazioni e tutti lumina!**


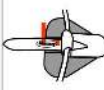
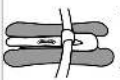
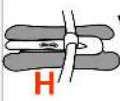
Fissaggio che tiene affidabilmente il tubo senza adesivo grazie a NANOPLAST®, In custodia affidabile da NANOPLAST, una pellicola antiscivola di nuova concezione con il cosiddetto effetto gecko.


Il fissaggio può essere aperta **qualsiasi volta**.  
Non c'è **nessun inquinamento** sul tubo.  
Il fissaggio continua a tenere!

Il velcro legante è disponibile come set con diversi supporti, **anche in idrocolloide** per ogni applicazione.  
Grazie al materiale di alta qualità **traspirante e delicata sulla pelle**, il fissaggio tiene anche durante la **doccia** o il lavaggio del paziente!


Il film **NANOPLAST®** è fatto di silicone con ca. 29000 ventose per cm<sup>2</sup>

Il legante in velcro è quindi particolarmente adatto per il fissaggio di ingressi ed uscite impiantati!

	<b>Velcro legante</b> Art. No 8501000 200 pezzi 8 confezioni da 25 pezzi
	<b>Velcro legante - Set piccolo</b> <b>Idrocolloide</b> Art. No 8501100 100 pezzi 4 confezioni da 25 pezzi
	<b>Velcro legante - Set grande</b> Art. No 8501130 100 pezzi 4 confezioni da 25 pezzi
	<b>Velcro legante - Set grande</b> <b>Idrocolloide</b> Art. No 8501135 400 pezzi

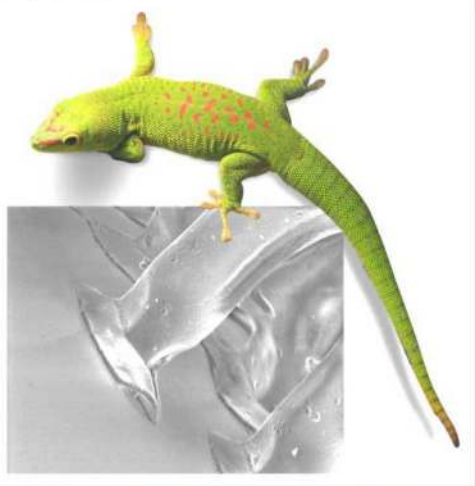


**Gecko®  
tiene**  
Det. Wehrhölzl

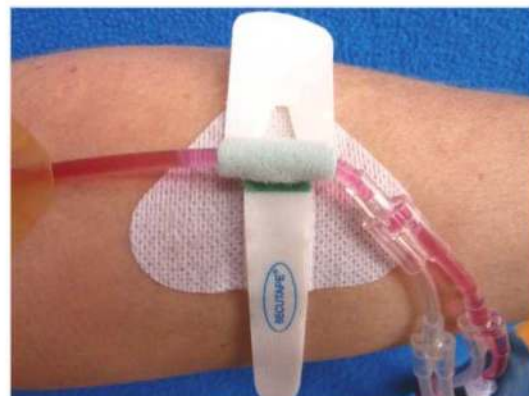

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Originalgrösse

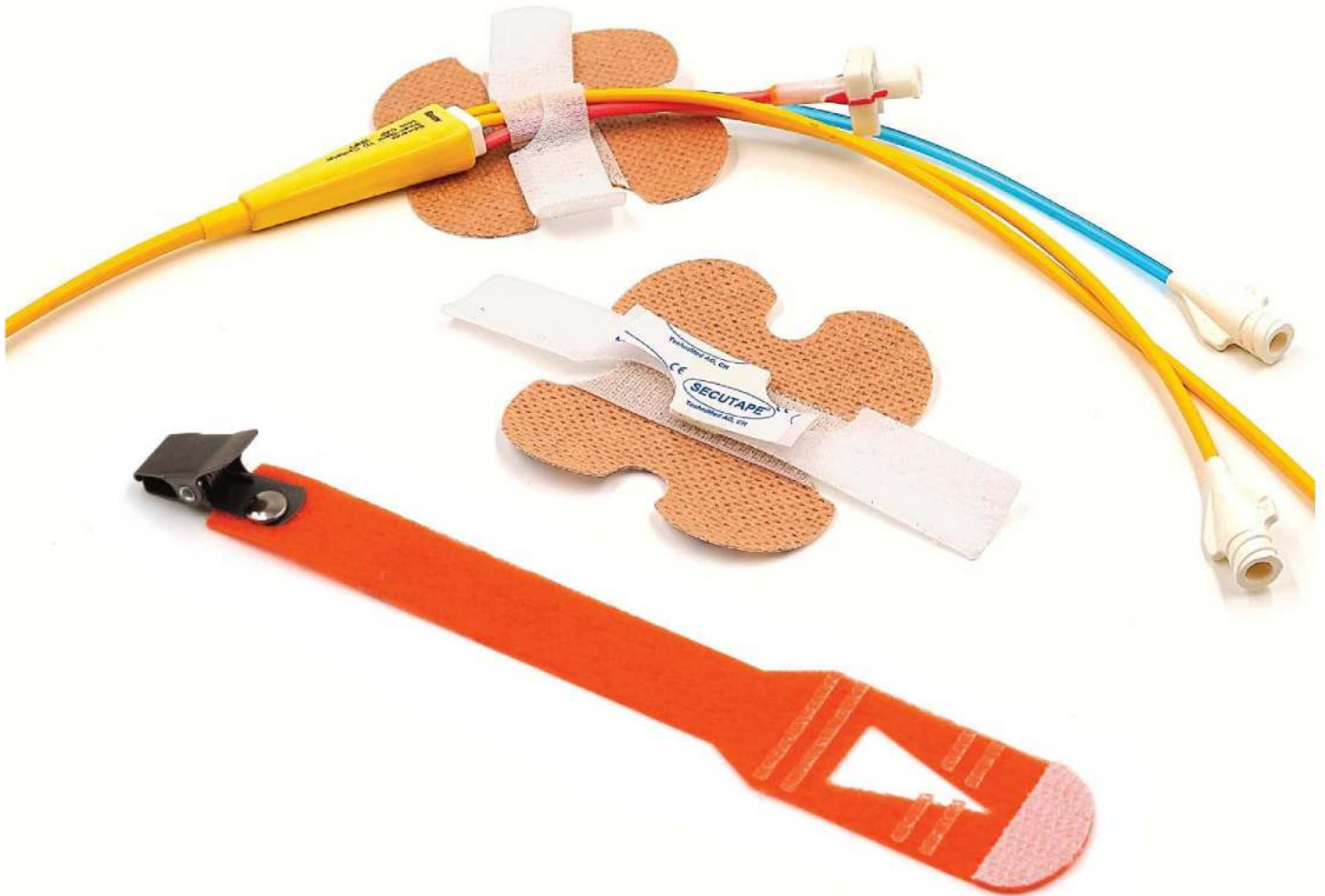





Unifix

## Per fissaggio di tubi e drenaggi, specialmente ZVK!

**UNIFIX** due pezzi, ideale per fissazione sicura di catereri, sonde, drenaggi sottili, per esempio di CVC multi-lumen.

La base è un'ottima tenuta, soprattutto ergonomica supporto in vello traspirante, che tiene anche quando il paziente viene lavato o fa la doccia.

Ideale anche per fissaggio sicuro al corpo di parti più piccole, per esempio di filtri schiacciati o tansducer.



### Set fissaggio ZVK


Il set è composto da un UNIFIX ed un KROKOFIX, un supporto flessibile antiscivolo, che viene utilizzato come scarico di trazione supplementare all'abbigliamento o la biancheria da letto.

**Così, la trazione ed i movimenti sul ZVK sono ridotti ed aiuta a prevenire le infiammazioni.**



**Può rimanere sul paziente:  
3 - 6 giorni**



UNIFIX può essere utilizzato anche per fissare parti più piccole - come filtri, trasduttori o simili - al corpo.

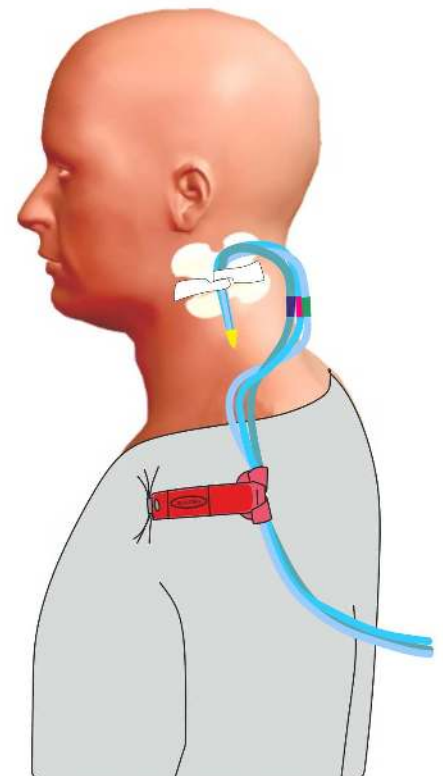

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Originalgrösse

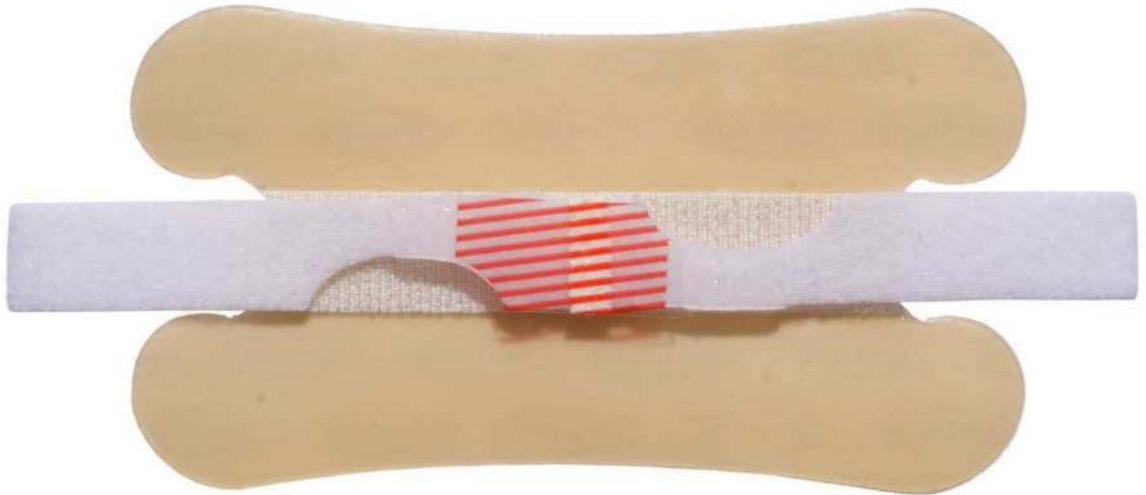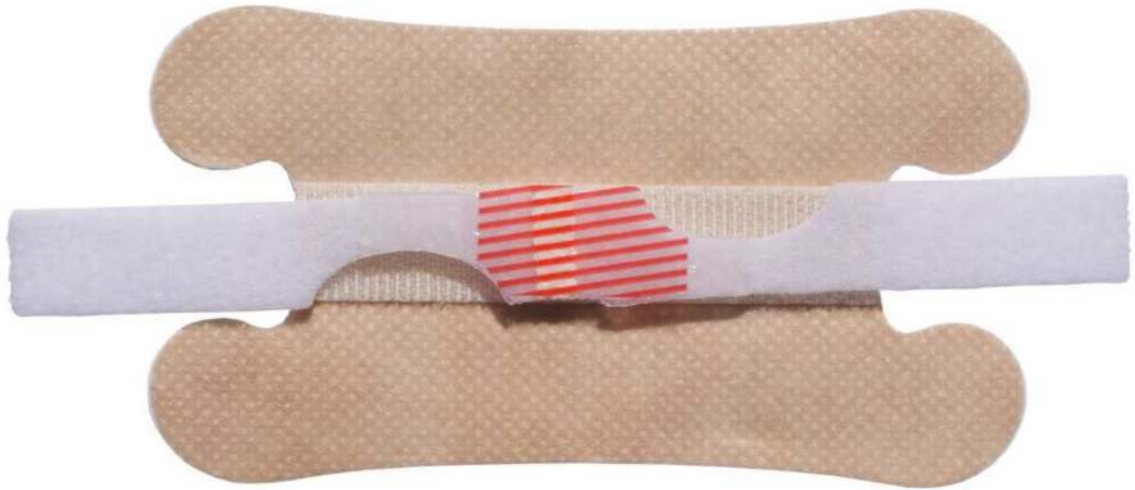




### Nostro fissaggio migliore per grande lumina

La base è fatta di vello traspirante, pelle-amichevole o idrocolloide con una forma speciale ed ergonomica.

La fissazione tiene molto bene, anche quando è bagnata o quando il paziente si fa la doccia.

Il supporto ha un rivestimento speciale antiscivolo che, a differenza dell'adesivo tiene di sicuro anche i tubi in silicone.

**Il fissaggio è specialmente indicato per drenaggi toracici, ECMO, cateteri vescicali**

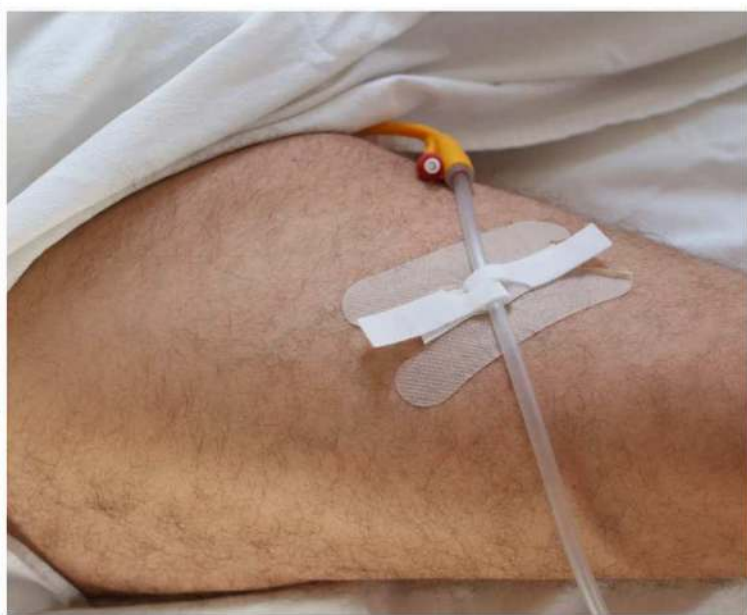

**Art. No 8501200 1 imball. 100 p.**

**Idrocolloide**

4 confezioni di 25 p.



buste singole.



**Art. No 8501201 1 imball. 100 p.**

**vello**

4 confezioni di 25 p.




buste singole.

**Può rimanere sul paziente  
3-5 giorni  
Idrocolloide 6 giorni**



Originalgrösse

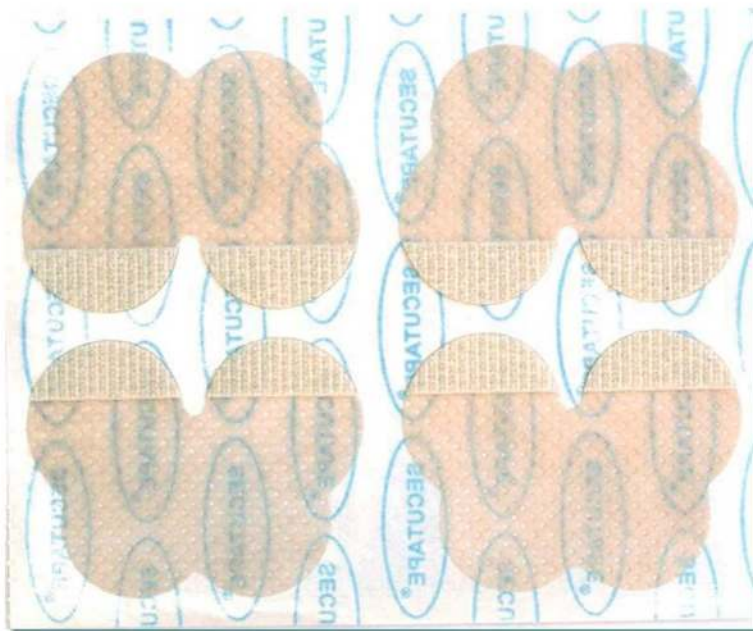



**Due pezzi di fissaggio brevettato per tutte le sonde nasali.**

Costituito di

- un **supporto** di fissaggio fatto in vello traspirante e delicata sulla pelle ed appositamente formato ergonomicamente
- ed un **nastrino** di ritenzione con speciale velcro e superficie adesiva.

**Il supporto rimane sul naso.**


Se necessario soltanto cambiare il nastro.

Non ci sono più danni alla pelle dovuti alla costante strappa del cerotto.

Non c'è più bisogno di una cura complessa della pelle.


Grazie al velcro la sonda può essere fissata sciolta. Così non sorgono punti di pressione.

Il Fissaggio aderisce anche durante la doccia o il lavaggio del paziente.

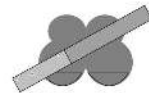**Art. No 8500400****Idrocolloide****1 imball. 200 p.**

Buste singole

8 confezioni da 25 p.

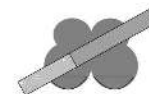**Art. No 8500401****Vello****1 imball. 200 p.**

Buste singole

8 confezioni da 25 p.

**Art. No 8500410****1 imball. 400 p.**

Buste singole

100 schedine da 4 p.

**Art. No 8500440****1 imball. 500 p.**

Buste singole


100 schedine da 5 p.

**Può rimanere sul paziente  
4 - 5 giorni****Idrocolloide: circa 5 giorni.**





Originalgrösse

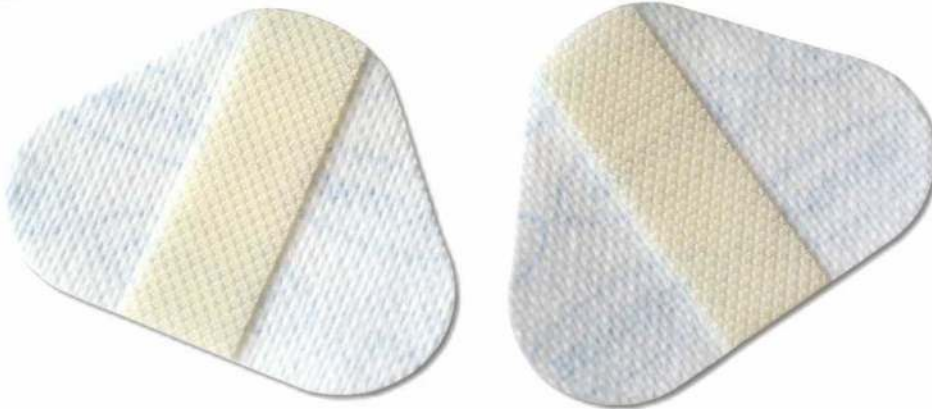

# SECUTAPE®

## Set fissaggio per tubi endotracheali orale e nasale

**Nostro fissaggio per tubi provato da più di 25 anni per un milione di volte. È L'ORIGINALE !**

Due supporti in vello o idrocolloide, delicati per la pelle e facile da applicare, con chiusura velcro. Fascie di nylon ipoallergeniche che non si estendono e non assorbono l'umidità. I nastri sono rivestiti al centro con un adesivo medico. L'adesivo non attacca tubi di plastica.


Il sistema di fissaggio permette un'aspirazione facile e sicura. Semplice applicazione e, grazie al lungo tempo di tenuta, poco costoso.

La fascia di fissaggio "Standard" è soffice su **un** lato.

La fascia di fissaggio "Soft" è soffice su **due** lati, che aiuta a prevenire i danni alla pelle.



**Può rimanere sul paziente 4 giorni**  
**Idrocolloide 6 jours.**

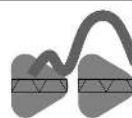


**Art. No 8500609 1 imb. 100 p.**

**Idrocolloide** 4 confezioni da 25 p.

Buste singole



Set

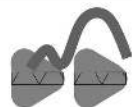

**Art. No 8500600 1 imb. 200 p.**

**Vello** 8 confezioni da 25 p.

Buste singole



Set



**Art. No 8500709 1 imb. 200 p.**

**Idrocolloide** 8 confezioni da 25 p.

Buste singole



**Art. No 8500800 1 imb. 200 p.**

8 confezioni da 25 p.

Buste singole



**NUOVO**



**Nastro morbido**  
**Art. No 8500805 1 imb. 200 p.**  
8 confez. da 25 p.



buste singole



**Art. No 8500700 1 imb. 200 p.**

8 confezioni da 25 p.

Buste singole



due pezzi.



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



**Originalgrösse**

Band 40 cm







## Set fissaggio per tubi endotracheali orale / nasale

### Set fissaggio EXTRA per tubi endotracheali

#### Nostro set fissaggio collaudato con nastro nuovo!

Fascia di nuova concezione, in nylon morbido, doppia faccia, ipoallergenica e tagliata nel mezzo.


Due supporti realizzati con un ottimo adesivo in vello pelle-amichevole o idrocolloide con chiusura a velcro.

Grazie alla fessura il nastro può essere posizionato più preciso.

È di alta qualità; non assorbe umidità e non si estende.

È fissato al tubo con una striscia di velcro ad alta tecnologia.

Non rimane alcun adesivo sul tubo quando viene rimosso.

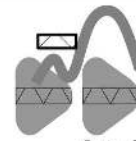

#### Set fissaggio EXTRA


per tubi endotracheali

Art. No 8500610 1 imb. di 200 p.  
buste singole  
8 confezioni di 25 p.

I componenti sono disponibile  
anche separatamente



**Può rimanere sul paziente  
circa 4 giorni**

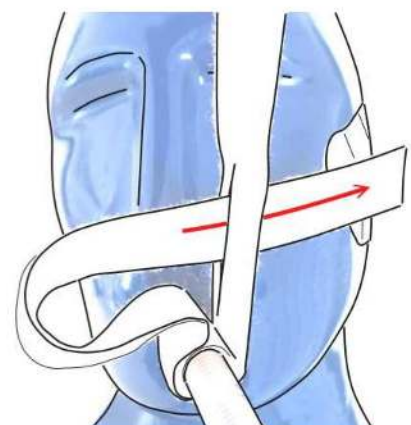

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Länge 37 cm



Liegedauer je nach Anwendung:  
bis 3Tage  
Hydrocolloid - 6 Tage

CE  
Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



## Fissaggio a breve termine autoadesivo per tubi endotracheali

### Fascia di fissaggio a breve termine per tubi endotracheali

Recentemente sviluppato, di alta qualità, autoadesiva, specialmente per l'anestesia.

La fascia con eccellente adesione è resistente allo strappo e non si estende.

Imballato igienicamente in una scatola dispenser, è facile da maneggiare grazie alla sua forma ed alla carta di copertura appositamente perforata.

Le scatole sono forate e possono essere aperte nella parte anteriore, facilitando così la rimozione e lo stoccaggio.



### Fissaggio a breve termine

per tubi endotracheali

**Art. No 8500820 1 imball. 400 p.**  
Scatole a 100 p.

**Art. No 8500821 1 imball. 2000 p.**  
Scatole a 100 p.




**La Fascia non sostituisce la  
corretta fissazione a lungo  
termine**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



**SECUTAPE®**

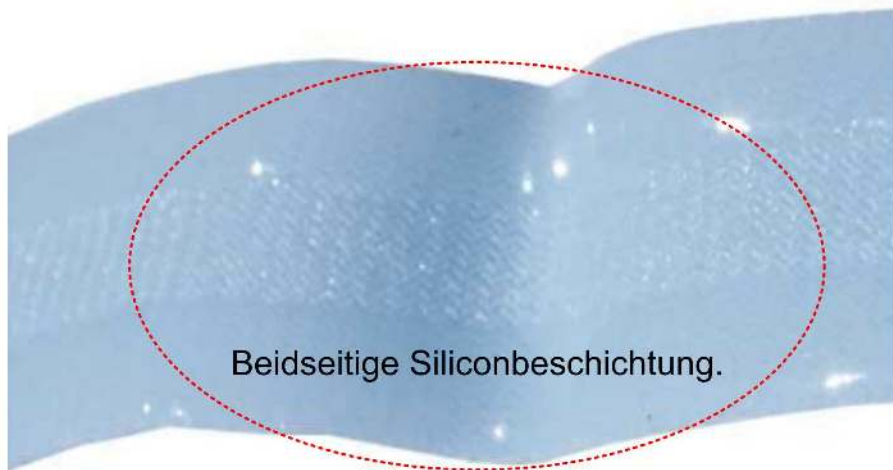

Beidseitige Siliconbeschichtung.

# SECUTAPE®

## Fascia tubus per tubi endotracheali

### SECUTAPE® Fascia tubus SILICONE

Una fascia di nylon brevettata, ipoallergenica, lanosa, che non si estende e non assorbe umidità.

Grazie al rivestimento in silicone su un lato la fascia non ha bordi duri e non scivola sulla pelle.

Per le sue caratteristiche non deve essere ben tesa. Quindi e grazie alla qualità idrofobica della fascia i danni alla pelle possono essere in gran parte evitati.

La fascia è tenuta al tubo da un nastro di velcro autoadesivo. Quando si stacca non lascia residui.

E' facile da maneggiare e deve essere essenzialmente scambiati meno spesso di nastri convenzionali.

**La più moderna tecnologia del velcro per una presa sicura**



#### Fascia tubus

Art. No 8500850 1 imb. 200 p.

buste singole.  
8 confezioni di 25 p.

Lunghezza 75 cm



**Può rimanere sul paziente:  
circa 1 - 2 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Länge 75 x 2cm







## Fascia Universale

### Per tubi endotracheali e cannule tracheali

Fascia nylon doppia faccia recentemente sviluppata. Ipoallergenica e piacevolmente lanosa.

Non si estende, non si inzepa ed è facile da pulire.

Quindi deve essere cambiata notevolmente meno rispetto alle fascie tradizionali di schiuma o tessile.

Non bisogna serrare la fascia. Così non sorgono danni alla pelle causati da pressione ed umidità!

Fissaggio molto sicuro, basso consumo, facile la maneggiare.

### Una fascia per tutte le applicazioni



**Può rimanere sul paziente 1 - 2 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)

**SECUTAPE®**

Originalgrösse

Tracheofix  
53 x 3.5 cm

Superflausch



Superabsorberpad

Masse 21 x 4.5 cm



CE

Made in Germany  
[www.secutable.ch](http://www.secutable.ch)





Tracheofix®

## Fissaggio per tracheostoma

**Nuova fascia di fissaggio in nylon super-soffici, ipoallergenico**

La fascia di alta qualità non si estende, è idrofobico e rimane asciuta.

È facile da indossare e deve essere cambiata notevolmente meno rispetto alle fascie convenzionali di schiuma o tessile.

### Pad SuperAssorbitore:

Adattato alla fascia, vendiamo un Pad Super Assorbitore medico, auto-adesivo. Mantiene il collo asciutto anche dei pazienti che sudano molto; previene in modo affidabile i lesioni alla pelle.

Ideale per la fissazione a lungo termine o per la pelle pre-danneggiata.

**Può rimanere sul paziente fino a 3 giorni.**

**Con Pad SuperAssorbitore fino a 5 giorni**



### Tracheofix

<b>Grande</b>	Lunghezza 53 cm
<b>Art. No 8501700</b>	<b>1 imb. 100 p.</b>
Buste singole..	8 confezioni di 25 p.

<b>Piccolo</b>	Lunghezza 38 cm
<b>Art. No 8501720</b>	<b>1 imb. 100 p.</b>
Buste singole..	8 confezioni di 25 p.



### Pad SuperAssorbitore

	Lunghezza 20 cm
<b>Art. No 8501770</b>	<b>1 imb. 200 p.</b>
Buste singole..	8 confezioni di 25 p.



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)





Länge 50 x 3 cm  
Absorber 20 cm



CE  
Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Tracheofix  
Conforto

## Fascia per cannule tachiali


Fascia superpile spesso e morbido in nylon, idrofobo ed ipoallergenico.

La fascia in due pezzi non si estende, è semplice da indossare, variabile regolabile e rimane asciuta.

Poiché non si bagna, è comodo.

A causa delle sue proprietà del materiale deve essere cambiata meno spesso rispetto alle fascie convenzionali di schiuma o tessile.

La fascia si adatta alla maggior parte delle misure dei colli, basta accorciarlo in caso di lunghezza eccessiva.

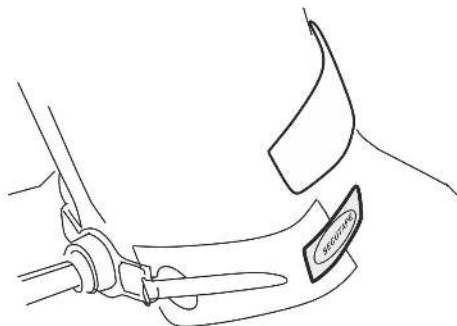


## Tracheofix Conforto

Art.No 8501750

Lunghezza 50cm

4 confezione di 25 p.  
buste singole

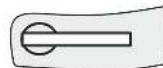

## Tracheofix Set Conforto

con Superabsorber

Art. Nr. 8501740

Lunghezza 45cm

Absorber 20 cm

4 confezione di 25 p.  
buste singole



Altre informazioni:

[www.secutape-schulungen.ch](http://www.secutape-schulungen.ch)

**Può rimanere sul paziente:  
fino a 5 giorni**

## Tracheofix Set Conforto

una buona soluzione per i pazienti con problemi di pelle o pelle molto sensibile.

Il pad autoadesivo da med. superassorbitore - incluso nel set - serve come ulteriore protezione contro i danni alla pelle.

Il set è una fissazione ideale a lungo termine e particolarmente adatto per l'assistenza domiciliare.



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



**SECUTAPE®**

Superflausch

**PVC & LATEX FREI!**

Fixierhalter zum Einsatz bei:

Tubing

Hand Art. 8500800

Art. 8501000

...örungen des Halters  
nur mit Wasser und Seife reinigen!

**Nicht sofort belasten!!**

Hydrocolloid braucht Hauttemperatur um gut zu halten!

Weitere Informationen in  
in unseren Anwendungs-  
oder unter

[www.secutape.com](http://www.secutape.com)



CE

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)





## Set fissaggio per ECMO

### Supporto alla testa regolabile per fissare un ECMO veno arteriosa

Il supporto elastico per la testa in nylon anallergico e soffice è regolabile a qualsiasi dimensione di testa.

E in combinazione con il nastrino di fissaggio ed i sostegni idrocolloide un sistema di fissaggio molto sicuro lasciando al paziente una certa libertà nei movimenti.

Il fissaggio aggiuntivo dei tubi al collo riduce il carico al punto di uscita.

Il Krokofix incluso nel set viene utilizzato per lo scarico della trazione del ulteriore derivazione sulla biancheria da letto.





Originalgrösse







# Krokofix<sup>®</sup>

## Fissaggio di tubi e drenaggi ai vestiti e lenzuoli

Fissaggio manuale anti-scivolo per tubi di tutti i tipi.

Specialmente per pazienti mobili e per scarico di grande trazione.

Basta aggrappare ai vestiti o alla biancheria

Krokofix è riutilizzabile e può essere disinfettato con i soliti mezzi.

Con Krokofix grande, sacchetti per l'urina (non troppo pesanti) possono essere fissati al letto.



### Krokofix grande

Art. No 8501420


1 imb. di 200 p.  
8 confezioni di 25 p.



### Krokofix piccolo

Art. No 8501410

1 imb. di 200 p.  
8 confezioni di 25 p.

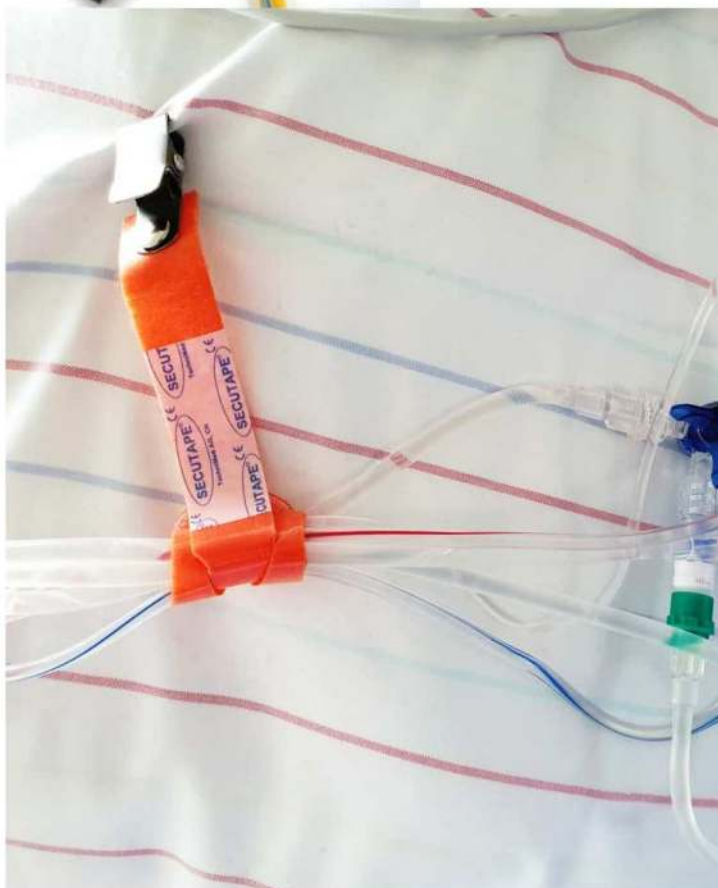

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)





**FIXIERUNG  
FIXATION  
FISSAGGIO**

*meglio e sicuro SECUTAPE*



[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)